

rok zał. 1949

TECH - MED®

ISO ISO CE
9001 13485

Instrukcja obsługi
**SAUNA DO TWARZY
Z INHALATOREM**

MODEL: TM-7100

SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM

TECH - MED

TM-7100

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sauna do twarzy z inhalatorem — zalety kąpieli parowej

Dziękujemy za zakup sauny do twarzy z inhalatorem **TECH - MED**

TM-7100. Kąpiel parowa twarzy to podstawowy element pielęgnacji urody kobiety. Stanowi niezbędny warunek właściwej pielęgnacji skóry. Kąpiel parowa przygotowuje skórę do innych zabiegów, takich jak nawilżanie, głębokie oczyszczanie lub odżywanie. Otwiera pory skóry i poprawia krążenie krwi, co stanowi znakomite przygotowanie skóry do dowolnego zabiegu pielęgnacyjnego. Użycie sauny do twarzy przed oczyszczaniem lub nawilżaniem znacznie poprawi skuteczność działania kosmetyków.

Ważne informacje

- Nie należy używać urządzenia w przypadku problemów z sercem, występowania trądziku różowatego, wyprysków lub łuszczycy.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zamontowaną maską.
- Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi zostać bezwzględnie wymieniony przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe, niezbędne są bowiem do tego specjalne narzędzia oraz części.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie należy demontować żadnych akcesoriów w czasie pracy urządzenia, gdyż grozi to poparzeniem gorącą wodą lub elementami o wysokiej temperaturze.
- Nigdy nie należy używać urządzenia przez czas dłuższy niż 20 minut.
- Po zakończeniu użycia należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy kierować gorącej pary w stronę oczu i innych miejsc wrażliwych na ciepło. W trakcie kąpieli parowej zawsze należy mieć zamknięte oczy.

Niebezpieczeństwa

- Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.
- Nie należy używać sauny podczas kąpieli.
- Jeżeli w urządzeniu skończy się woda, należy je niezwłocznie wyłączyć (najlepiej jest wyłączyć je jeszcze przed wyczerpaniem wody w zbiorniku). Przed opróżnieniem zbiornika należy odczekać, aż urządzenie wystygnie.

Obsługa sauny do twarzy

- Włącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że sauna do twarzy umieszczona jest na twardej i płaskiej powierzchni lub na stole.
- Napełnij urządzenie wodą z kranu, korzystając z dołączonego naczynia z podziałką (rys. 11).
- Nie wlewaj wody powyżej oznaczenia „MAX” (rys. 2) na zbiorniku.
- Zamontuj maskę, przekręcając ją w prawo (rys. 1).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, aż zapali się czerwona lampka kontrolna. Rozpocznie się podgrzewanie wody, a z urządzenia zacznie unosić się para. Jeśli zbiornik został napełniony do maksimum, czas kąpieli parowej będzie wynosił około 20 minut.
- Naciśnij przycisk ponownie. Zasilanie zostanie odłączone.
- Usiądź przed urządzeniem. Pochyl się do przodu tak, aby twarz znajdowała się nad maską.
- Nie zbliżaj zbyt blisko do maski, zawsze zachowaj pewną odległość (rys. 7).
- Kąpiel parowa nie powinna trwać dłużej niż 20 minut w ciągu dnia ani odbywać się częściej niż 2–3 razy w tygodniu.
- Jeżeli woda wyparuje lub zdecydujesz się na przerwanie kąpieli, naciśnij przycisk włącznika w celu wyłączenia zasilania.
- Lampka kontrolna zgaśnie (rys. 3).
- Po zakończeniu kąpieli parowej przemyj twarz zimną wodą. Użyj następnie maseczki nawilżającej albo wybranego kremu czyszczącego lub złuszczającego.
- Wymij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed opróżnieniem pojemnika z wodą.

- Przed zdjęciem maski odczekaj około 10–15 minut, aż urządzenie wystygnie.
- Zdejmij maskę, przekręcając ją w lewo (rys. 9).
- Wylej resztę wody, odwracając urządzenie do góry nogami nad umywalką.

Dyfuzor (rys. 5)

Wyjątkowe urządzenie, jakim jest dyfuzor, zwiększa przyjemność i wygodę użycia sauny.

- Otwórz pokrywę dyfuzora (rys. 5).
- Umieść w dyfuzorze wacik i zamknij pokrywę.
- Aby dyfuzor mógł działać prawidłowo, musi zostać właściwie zamocowany.
- Włącz urządzenie i rozpocznij kąpiel twarzy.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda. Po zakończeniu działania odczekaj około 10–15 minut, aż urządzenie wystygnie.


Regulowana płyta parowa

- Aby przyspieszyć czas nagrzewania, można zamknąć płytę parową (rys. 3).
- Można włączyć płytę parową w celu regulowania intensywności pary unoszącej się ze zbiornika z wodą (rys. 12).
- Gdy płyta parowa jest zamknięta, para będzie wydobywać się z końcówki (rys. 5).
- **Nigdy nie dotykaj ani nie blokuj** zaworu pary, gdyż grozi to poparzeniem (rys. 10).

Instrukcja obsługi inhalatora (rys. 6)

- Nie zbliżaj zbyt blisko nosa do maski inhalatora, zawsze zachowaj pewną odległość (rys. 8).
- Inhalacja nie powinna trwać dłużej niż 10 minut w ciągu dnia ani odbywać się częściej niż 2–3 razy w tygodniu.
- Jeżeli woda wyparuje lub zdecydujesz się na przerwanie kąpieli, naciśnij przycisk włącznika w celu wyłączenia zasilania. Lampka kontrolna zgaśnie (rys. 3).









- Wymij wtyczkę z gniazdka ściennego przed opróżnieniem pojemnika z wodą.
- Przed zdjęciem maski odczekaj około 10–15 minut, aż urządzenie wystygnie.
- Odłącz maskę inhalatora.
- Wylej resztę wody, odwracając urządzenie do góry nogami nad umywalką.

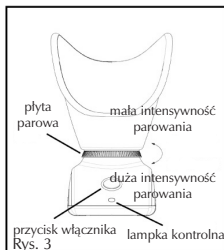

Czyszczenie urządzenia

- Urządzenie należy oczyścić po każdorazowym użyciu, aby zapobiec osadzaniu się tłuszczu i innych materiałów.
- Do czyszczenia części wykonanych z tworzywa sztucznego nie należy używać alkoholu, acetonu, benzyny, środków do szorowania itd.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci.
- Należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wystygnie, a następnie opróżnić zbiornik z wodą.
- Należy oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką, wilgotną ściereczką, a następnie przetrzeć ją na sucho.
- Nie należy używać ostrych i ostro zakończonych narzędzi, może to bowiem spowodować uszkodzenie powierzchni grzewczej.
- Nie należy myć podstawy urządzenia bieżącą wodą, zawiera ona bowiem elementy elektryczne.

Produkt zawiera materiały podatne do recyklingu. Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. W celu uzyskania informacji o najbliższym punkcie utylizacji należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

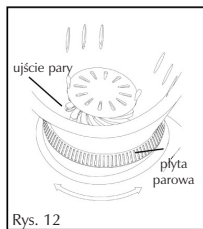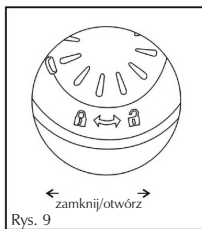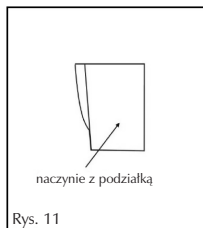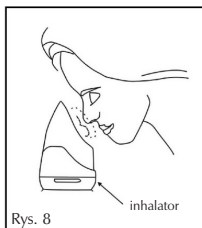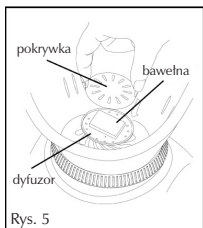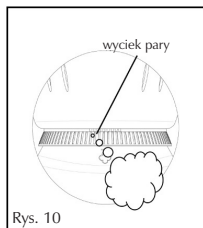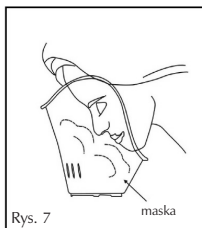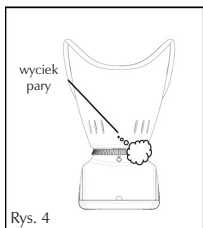

Gwarancja

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją od daty zakupu potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy oraz paragonem fiskalnym, który musi być dołączony do niniejszej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje skutków wypadku, nieprawidłowego użycia, zaniedbania lub użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Należy stosować wyłącznie załączone do produktu akcesoria. Zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów niż zatwierdzone może wiązać się z utratą gwarancji. Nie należy otwierać urządzenia. W przypadku stwierdzenia otwarcia lub ingerencji w obudowę urządzenia, gwarancja automatycznie traci ważność. Gwarancja nie obejmuje części podatnych na zużycie ani baterii (jeśli były załączone). Gwarancja traci ważność po roku od daty zakupu. Po upływie tego czasu, wszelkie usługi serwisowe są płatne. Więcej informacji na temat serwisu technicznego, zarówno w ramach gwarancji, jak i usług odpłatnych, można uzyskać pod adresem techmed@techmed.pl. Naprawa lub wymiana produktu dokonana w ramach niniejszej gwarancji nie podlega żadnej formie rekompensaty. Zabrania się korzystania z produktu w miejscach publicznych. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia osób, mienia bądź zwierząt domowych spowodowane nieprzestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji obsługi, zwłaszcza ostrzeżeń związanych z instalacją, eksploatacją i konserwacją urządzenia. Polityka firmy **TECH - MED** zakłada nieustanne udoskonalanie oferowanych przez nią produktów, dlatego firma **TECH - MED** zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów, częściowo lub w całości, bez uprzedzenia i zgodnie z wymogami produkcyjnymi, z wyłączeniem jakiegokolwiek odpowiedzialności firmy **TECH - MED** oraz jej dystrybutorów.



Model

.....

Nr seryjny

.....

Data sprzedaży

.....

Pieczętka punktu sprzedaży

.....

Opis usterki

.....

.....

.....

.....

Model

.....

Nr seryjny

.....

Data sprzedaży

.....

Pieczętka punktu sprzedaży

.....

Opis usterki

.....

.....

.....

.....

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

rok zał. 1949

TECH - MED®

TECHNIKA MEDYCZNA

B. WÓJCIK s-ka jawna

02-735 Warszawa, ul. Studencka 49

Tel. (022) 853 30 10,

e-mail: techmed@techmed.pl

www.techmed.pl

S k l e p f i r m o w y

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98

Tel. (022) 654 64 92, Fax (022) 620 77 42

Przed użyciem sauny prosimy przeczytać instrukcję.

Życzymy Państwu dużo zdrowia