


JUŻ 60 LAT
POMAGAMY ZDROWO ŻYĆ



Nebulizator RF6-basic z zatyczką i 2 trybami nebulizacji

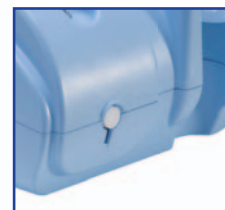

Powietrze oczyszczane za pomocą specjalnego filtra



Wygodny uchwyt



Wygodna torba do przenoszenia sprzętu



Rozmiar cząsteczek testowany przez TÜV



Wykonany z przeciwalergicjnych i biokompatybilnych materiałów

TM-Neb-aid

rok zał. 1949

TECH - MED®



TECHNIKA MEDYCZNA

MAŁE I LEKKIE URZĄDZENIE DO CZĘSTEGO STOSOWANIA W TERAPII AEROZOLOWEJ • MAŁE I LEKKIE • DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO LECZENIA CHOROBY CAŁEGO UKŁADU ODDECHOWEGO

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Nebulizator RF6 basic ²			
	Z zamkniętym zaworem TRYB STANDARDOWY	Z otwartym zaworem TRYB SZYBKI	
Maksymalna prędkość nebulizacji	ok. 0,25 ml/min	ok. 0,32 ml/min	
Rozmiar cząsteczek (MMAD)	3,8 μ m 3,8 μ m	4 μ m 4 μ m	Badania in vitro zostały przeprowadzone w firmie Inamed Research GmbH & Co KG w imieniu TÜV Rheinland Product Safety GmbH Niemcy zgodnie z aktualną normą europejską dot. urządzeń stosowanych w terapii aerozolowej oraz normą EN – 13544-1. Szczegółowe dane dostępne na żądanie.
Ilość wdychanych cząsteczek < 5 μ m (FPF)	62%	63%	
Maksymalna objętość leku	8 ml		

DANE TECHNICZNE

Sprężarka tłokowa (do użytku bez konieczności nawilżania i konserwacji)	
Napięcie:	230 V ~ 50 Hz/140 VA Inne rodzaje napięcia dostępne na żądanie
Filtracja powietrza:	Dla uzyskania lepszej jakości, sprężone powietrze wydobywane jest na zewnątrz obudowy i filtrowane przez system filtrujący o dużej wydajności (porowatość 50/70 μ m)
Wydajność sprężarki:	ok. 9 l/min
Maks. ciśnienie:	ok. 1,5 bar
Poziom głośności (dla 1 m):	ok. 56 dB (A)
Wymiary:	18 (długość) x 14 (szerokość) x 13 (wysokość) cm
Masa:	1,300 Kg
Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG:	
Zatwierdzone przez:	
Gwarancja:	2 lata

Akcesoria	Kod
Elementy zestawu RF6 basic ² : nebulizator, ustnik oraz pojemnik na lek	ACO369P
Przewód powietrzny 1 m	ACO35
Maska PVC dla dorosłych	ACO79
Końcówka do nosa dla dzieci	ACO56

W celu uzyskania dalszych informacji o terapii aerozolowej i produktach firmy Flaem Nuova należy skontaktować się z naszą siecią sprzedaży lub odwiedzić naszą stronę internetową www.flaemnuova.it

rok zał. 1949

TECH - MED®
TECHNIKA MEDYCZNA
B. WÓJCIK s-ka jawna

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
SKLEP FIRMOWY: tel.: (22) 654 64 93
BIURO HANDLOWE: tel.: (22) 654 64 92
faks: (22) 620 77 42
SERWIS: tel.: (22) 853 30 10
www.techmed.pl
techmed@techmed.pl



- Certified Management System
- EN ISO 13485
- EN ISO 9001

